



La maschera
made in Italy
riutilizzabile
all'infinito



UNI EN14683
EN ISO 10993

Tecnologia italiana certificata.

Morbida gomma anallergica, design ergonomico e cinturini regolabili per una migliore aderenza al volto.

L'efficacia del filtro, il design ergonomico. Un binomio fondamentale per le migliori prestazioni di una maschera protettiva. Drop Mask è stata progettata tenendo presente questi due fattori essenziali.

Drop Mask è un Dispositivo Medico in classe I conforme alle indicazioni contenute nella Uni en 14683:2019 Direttiva 93/42/CEE Parte I, Allegato IX, Definizioni concernenti i Dispositivi Medici e modificata da MDD 2007/47/CE, (regolamento UE 2017/745). La semimaschera Drop Mask è classificabile secondo i parametri:

Durata: Breve-lungo termine (secondo la Definizione 1.1).

Caratteristiche: non invasive per modo di applicazione (secondo la Definizione 1.2).

CE

Inoltre la maschera ad uso medico Drop, essendo un dispositivo a contatto facciale per una durata limitata, è conforme alle norme di Biocompatibilità secondo la EN ISO 10993-1 2009.



EFFICACE



COMODA



LAVABILE




IGIENIZZABILE



GREEN

DESIGN ERGONOMICO IN DIMENSIONI RIDOTTE

Una linea avvolgente ed ergonomica disegna sul fronte lo spazio necessario per la protezione del naso e della bocca, sino al mento. Sul profilo Drop Mask si adatta alle curve del viso per favorire la migliore aderenza, limitando la pressione sul volto.

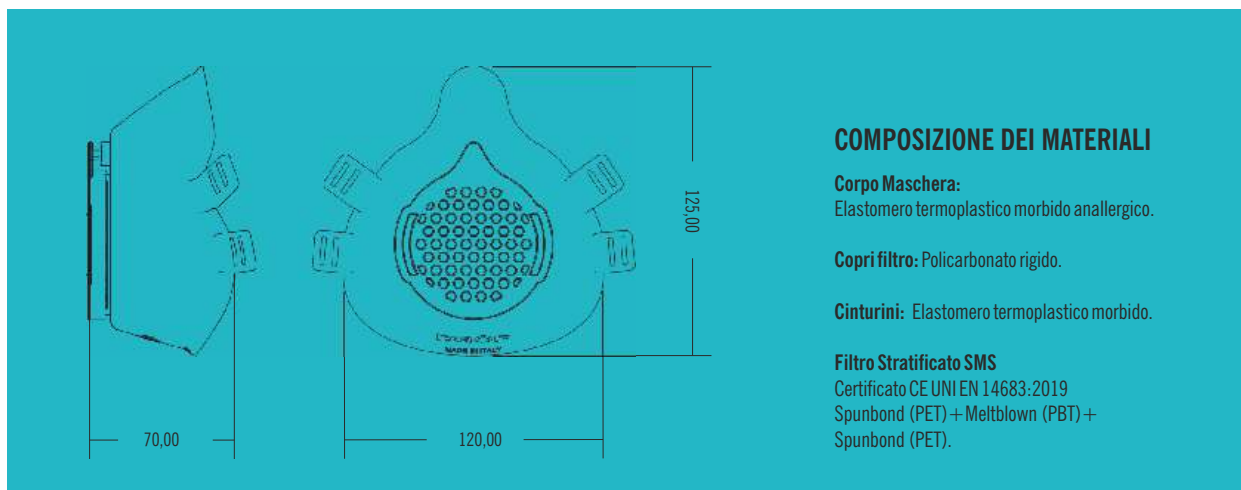

Visiera Shield

Brevetto Drop, Protezione paraschizzi Shield in policarbonato. Si installa sul corpo maschera Drop Mask.

Cinturini

In versione orecchie o su richiesta con bardatura alla testa. Realizzati in gomma anallergica, permettono una regolazione ottimale al viso.

Copri filtro

Elemento rigido a goccia in Policarbonato (PC) per il bloccaggio e la protezione del filtro.

Filtro stratificato

Filtro intercambiabile tre strati termosaldati Spunbond (PET)-Meltblown (PBT)-Spunbond (PET), water repellent. Senza leganti lattici e senza colle.

Maschera

Corpo Drop Mask in morbida gomma anallergica. Le linee ergonomiche frontali e del profilo permettono alla maschera di adeguarsi al viso.



Nell'aria i nostri nemici invisibili

Disperse nell'aria sono presenti le particelle più pericolose per la nostra salute. Un nemico insidioso, impossibile da vedere ad occhio nudo. Percepriamo con più difficoltà i pericoli che non riusciamo a vedere.

Ogni luogo pubblico affollato è una potenziale occasione di contagio. Usa Drop quando vai a fare la spesa e in tutti i luoghi dove l'affluenza di pubblico può essere elevata.

L'EFFICACIA FILTRANTE DEL TRIPLO STRATO

I filtri intercambiabili Drop sono realizzati in materiale idrorepellente e certificati dal fabbricante. Proteggono grazie ad una trama in triplo strato che blocca il passaggio delle particelle più grandi già al primo stadio di Spunbond (PET), e quelle di dimensioni ridotte, con lo strato di Meltblown (PBT) centrale. Lo strato ulteriore di Spunbond consente di filtrare l'aria allo stesso modo nella fase di espirazione.



Sulle maschere Drop, possono essere installate due tipologie di filtro:


- **Protection DF01** . Un filtro bidirezionale classificato Tipo II, il massimo grado di protezione raggiungibile per maschere facciali ad uso medico. Protection può essere utilizzato anche in ambito sanitario, in sala operatoria o per altre attività mediche.
- **High Perform DF02**. Un filtro con caratteristiche prestazionali classificato Tipo IIR (di prossima commercializzazione). Entrambe le tipologie operano con la stratificazione dei materiali di cui sono composti, con grammature diverse.

Strato di Spunbond

Lo strato esterno di Spunbond è in grado di arrestare le particelle disperse nell'area di dimensioni maggiori.

Strato di Spunbond

Il secondo lato esterno di Spunbond chiude a sandwich il filtro, proteggendo lo strato interno di Meltblown e rendendo i filtri Drop funzionali in entrambe le direzioni: inspirazione ed espirazione.

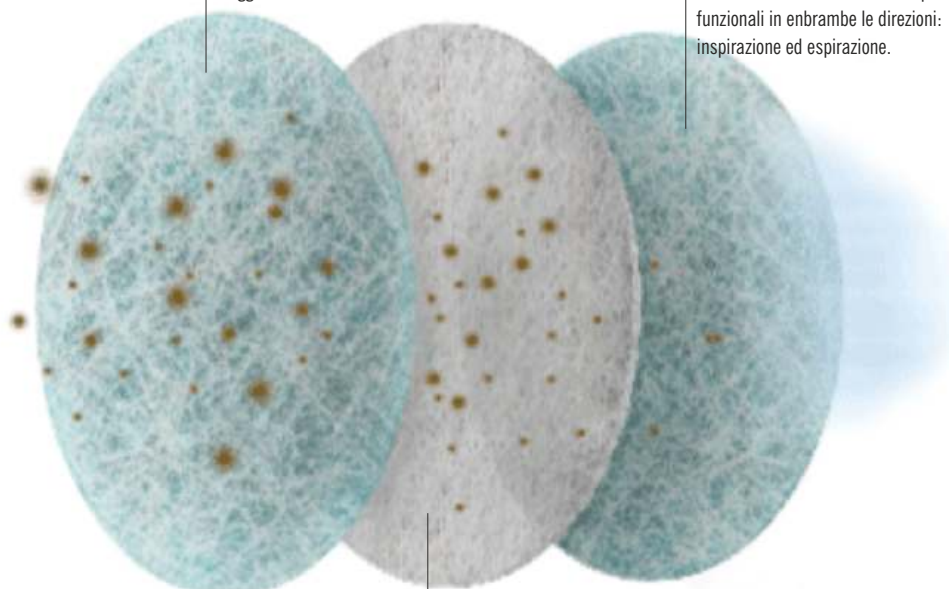

Strato di Meltblown

Il grande alleato per arrestare le particelle più piccole di sostanze disperse nell'aria.






Guarda le schede tecniche sul sito www.dropmask.it



Progettata per essere utilizzata facilmente

Durante la giornata, qualunque sia il tuo luogo di lavoro, Drop Mask ti aiuta a proteggerti limitando le interferenze con eventuali altri dispositivi di sicurezza come caschi e bardature.

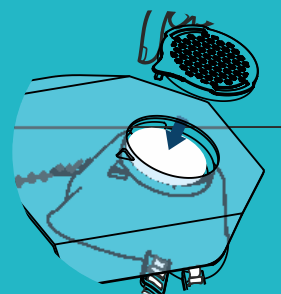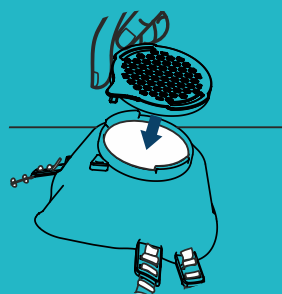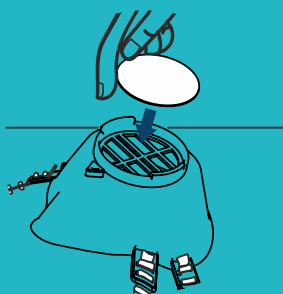

Nei più comuni ambienti a rischio

Proteggersi fra la gente con praticità qualunque sia la tua attività.


A piedi, in bicicletta, in treno, Drop ti protegge.

Il design ergonomico concentra le forme rendendola leggera, poco invasiva al volto e facile da riporre quando non serve.

Grazie alla visiera aggiunta Shield, Drop Mask può essere utilizzata per proteggere gli occhi e le vie respiratorie da spruzzi e schizzi di sostanze disperse nell'aria. E quando non serve? Rimuovi la visiera e continui ad utilizzare la maschera.



Cinturini di fissaggio alle orecchie
(di serie)

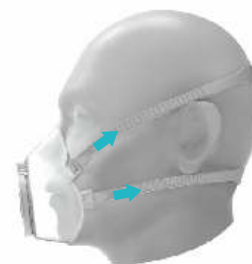

Cinturini di fissaggio con bardatura
(opzionali)



UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
UNI EN ISO 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



Drop Mask è prodotta utilizzando energia da fonti rinnovabili



Cappello Group S.p.A.

Zona Industriale IV fase, viale 3 n. 5 97100 Ragusa (RG) Italy T. +39 0932 660211 F. +39 0932 660250 info@dropmask.it

Le informazioni e le immagini contenute in questo documento sono di proprietà di Cappello Group S.p.A. È vietata la riproduzione anche parziale.

Le immagini e le illustrazioni riprodotte hanno valore dimostrativo. Colori e finiture possono non risultare conformi al prodotto originale.

Cappello Group S.p.A. si riserva di modificare informazioni e/o le caratteristiche tecniche secondo le esigenze necessarie a rendere il documento aggiornato.

Drop Mask e Drop Shield sono prodotti brevettati da Cappello Group S.p.A. Drop è un marchio depositato.



SCOPRI DI PIÙ